



MAINIT ZILVERNITRAAT **MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften**

Medisch hulpmiddel

LEES VOOR GEBRUIK A.U.B DE **GEBRUIKSAANWIJZING ZORVULDIG DOOR.**

Gebruik dit medisch hulpmiddel altijd precies zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing of volgens de instructies van uw arts of apotheker.

Raadpleeg uw apotheker als u meer informatie of advies wenst of bijwerkingen opmerkt. Wanneer er na herhaaldelijk gebruik geen verbetering optreedt of er zelfs sprake is van verslechtering, neem dan contact op met uw arts.

INHOUD VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Wat zijn MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften; waarvoor worden ze gebruikt?
2. Waar moet u vóór het gebruik van MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften op letten?
3. Hoe moeten MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften worden gebruikt?
4. Welke bijwerkingen kunnen er optreden?
5. Hoe moeten MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften worden bewaard?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

1. WAT ZIJN MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften **EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT?**

De caustische stiften bevatten zilvernitraat en kaliumnitraat. De hoge concentratie zilvernitraat werkt korstvormend en bijtend. Kaliumnitraat wordt gebruikt als verhardingsmiddel zodat de reactie van het zilvernitraat milder is. Het mengsel is net als bij een lucifer op een stift aangebracht en na bevochtiging gereed voor gebruik. Dit medisch hulpmiddel maakt een puntsgewijs gebruik mogelijk zodat de werking ervan tot nauwkeurig afgebakende plekken beperkt blijft.

De MAINIT ZILVERNITRAAT caustische stiften, komen in 2 toepassingsvormen voor:

1. Als een enkele stift met een dop en een punt van zilvernitraat. Deze is bedoeld voor 1 behandelperiode van 1 persoon. Het gebruik door anderen wordt sterk afgeraden in verband met besmetting.
2. Als langere stift voor **eenmalig** gebruik. Deze zijn verpakt in een zakje van 10 of van 100.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

De caustische stiften worden gebruikt bij het behandelen van wratten verwijderen van overtollig weefsel (ontstaan bij het genezingsproces van wonden).

2. WAAR MOET U VÓÓR HET GEBRUIK VAN MAINIT Caustische stiften **MET ZILVERNITRAAT OP LETTEN?**

MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften mogen niet worden gebruikt als u allergisch bent voor zilvernitraat of kaliumnitraat. Het kan tot 24 uur duren voordat het behandelde gebied is verkleurd.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:

- Bij alle ongewoon verkleurde of ongewoon gevormde huidveranderingen die niet eenduidig als, 'wild vlees' of als gewone wratten herkenbaar zijn, mogen de MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften alleen onder toezicht van een arts worden gebruikt.
- Raak de tip (etsmiddel) van de MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften niet met vochtige handen aan.
- Bescherm uw kleding en andere voorwerpen tijdens het gebruik van de MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften.
- Zilvernitraat veroorzaakt bruinzwarze vlekken die met gangbare reinigings- of wasmiddelen niet kunnen worden verwijderd.
- Gezonde huid die onbedoeld met de tip van de MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stift in aanraking komt, moet zorgvuldig met stromend water en een spons worden gereinigd. Desondanks kan er sprake zijn van een ongevaarlijke donkere verkleuring van deze huidplekken. De donkere verkleuring verbleekt na ongeveer 10-14 dagen weer.
- Wanneer de MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stift met het oog in aanraking is gekomen, onmiddellijk met geopend ooglid minimaal 5 minuten onder stromend water spoelen en daarna een arts raadplegen.
- De Caustische stift niet gebruiken op gevoelige plekken van het lichaam (zoals ogen, genitaliën).
- Bij gebruik rond de mond dient u erop te letten dat er geen delen van de tip worden ingeslikt.
- Elk ernstig voorval in verband met het medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant, en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

KINDEREN: Gebruik bij kinderen jonger dan 3 jaar mag alleen na advies van een arts.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING: Als u zwanger bent, borstvoeding geeft, vermoedt dat u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, dan dient u vóór gebruik van dit medisch hulpmiddel uw arts of apotheker te raadplegen.

RIJVAARDIGHEID: Het gebruik van MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften heeft geen invloed op de rijvaardigheid.

3. HOE MOETEN MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften WORDEN GEBRUIKT?

Gebruik dit medisch hulpmiddel altijd precies zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

HOE TE GEBRUIKEN:

- Voor uitwendig gebruik;
- Te behandelen plek reinigen;

Zie tekening onder;

Fig1. Doe een druppel schoon water op een niet absorberend, schoon, stevig oppervlak, zoals een omgekeerd glas op een tafel.

Fig2. Plaats de top van de Caustische stift in de druppel water, beweeg de top even heel voorzichtig (zo'n 2 seconden) in het water.

Fig3. De stift is klaar voor gebruik.


Fig4. Laat het water of de top van de stift **NIET** in contact komen met gezonde huid, kleding, meubels of andere oppervlakken. Bescherm gezonde huid rond de te behandelen plek met een dun laagje vaseline.

Fig5. Dep **ZACHT** met de punt van de Caustische stift op de te behandelen plek. Gebruik **GEEN** druk. Als de punt breekt, zorg dan dat alle delen worden verwijderd met een papieren doekje.

Fig6. Laat de behandelde plek goed drogen, de plek zal binnen korte tijd zwart kleuren, en in de dagen erna worden afgestoten.

Herhaal de behandeling om de 2-3 dagen tot het gewenste resultaat is bereikt. Het kan gebeuren dat meerdere behandelingen nodig zijn. Gebruik het niet langer dan 14 dagen. Treedt er geen verbetering op, raadpleeg dan een arts.

Gebruik een papieren doekje om de punt van de stift en het restant water te drogen.

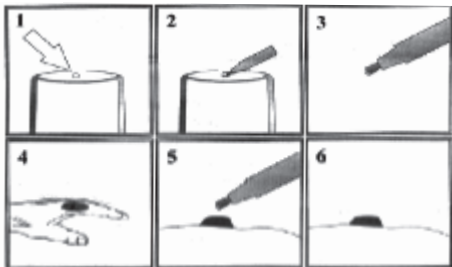

BIJ OVERDOSERING VAN DE MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften:

Excessief gebruik (zonder te wachten op verandering) kan rond de behandelde plaats tot irritaties of ontstekingsreacties leiden.

In dergelijke gevallen dient u vóór verder gebruik uw arts te raadplegen.

4. WELKE BIJWERKINGEN KUNNEN ER OPTREDEN?

Er kan sprake zijn van overgevoeligheidsreacties of lokale irritaties van de huid zoals jeuk, rode verkleuringen, blaasjes of een licht brandend gevoel. Als u bijwerkingen opmerkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor bijwerkingen die niet in de gebruiksaanwijzing staan vermeld.

5. HOE MOETEN MAINIT ZILVERNITRAAT Caustische stiften WORDEN BEWAARD?

- Bewaar dit medisch hulpmiddel in de originele verpakking om de inhoud tegen licht te beschermen.
- Bewaar de verpakking op een droge plaats. Sluit de verpakking na opening tot het volgende gebruik zorgvuldig.
- Bewaar dit medisch hulpmiddel buiten bereik van kinderen.
- U mag dit medisch hulpmiddel na de vervaldatum niet meer gebruiken.
- De vervaldatum staat op de achterkant van de verpakking vermeld.
- Na gebruik kunnen de stiften via het reguliere huisvuil worden afgevoerd.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN AANVULLENDE INFORMATIE:

Verkrijgbaar in verpakkingen van:

- Eenmaal 1 stuk 40% caustische stift; Rode stift verpakt in kartonnen doosje; Mainit artnr 226504 (een persoon, meerdere keren te gebruiken)
- Eenmaal 1 stuk 95% caustische stift; Blauwe stift verpakt in kartonnen doosje; Mainit artnr 226511 (een persoon, meerdere keren te gebruiken)
- Eenmaal 100 stuks 75% caustische stift; Langere stiften verpakt in een zakje van 100 in een plastic koker; Mainit artnr 226505 (eenmalig gebruik)
- Eenmaal 100 stuks 95% caustische stift; Langere stiften verpakt in een zakje van 100 in een plastic koker; Mainit artnr 226506 (eenmalig gebruik)
- Eenmaal 10x10 stuks 75% caustische stift; Langere stiften verpakt in 10 zakjes van 10 in een kartonnen doosje; Mainit artnr 2265051 (eenmalig gebruik)
- Eenmaal 10x10 stuks 95% caustische stift; Langere stiften verpakt in 10 zakjes van 10 in een kartonnen doosje; Mainit artnr 2265061 (eenmalig gebruik)

Meer informatie is te vinden op onze homepage www.mainit-bv.nl.

FABRIKANT:

 Mainit-BV
Roode Wildemanweg 5
1521PZ Wormerveer
Nederland
info@mainit-bv.nl
www.mainit-bv.nl

VERSIE VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING: 20 Oktober 2025

Rev.03





MAINIT SILVERNITRATE MAINIT SILVERNITRATE Caustic Sticks

Medical device

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS FOR USE.

Always use this medical device exactly as described in the instructions for use or as directed by your physician or pharmacist. Consult your pharmacist if you need further information or advice or notice any side effects. If there is no improvement or even deterioration after repeated use, contact your physician.

CONTENTS OF INSTRUCTIONS FOR USE:

1. What are MAINIT SILVERNITRATE Caustic Sticks; what are they used for?
2. What should you pay attention to before using MAINIT SILVERNITRATE Caustic sticks?
3. How should MAINIT SILVERNITRATE Caustic sticks be used?
4. What side effect may occur?
5. How should MAINIT SILVERNITRATE Caustic sticks be stored?
6. Package contents and additional information

1. WHAT ARE MAINIT SILVERNITRATE Caustic sticks AND WHAT ARE THEY USED FOR?

Caustic sticks contain silvernitrate and potassium nitrate.

The high concentration of silver nitrate has a crusting and caustic effect. Potassiumnitrate is used as a hardening agent so that the reaction of the silver nitrate is milder. The mixture is applied to a stick just like a match and ready for use after moistening.

This medical device allows a spot application so that its action is limited to precisely defined areas.

The MAINIT SILVERNITRATE caustic sticks, come in 2 forms of application

1. As a single stick with a cap and tip of silver nitrate. This is intended for 1 treatment period of 1 person. Use by others is strongly discouraged due to contamination.
2. As a longer **single-use** stick. These are packaged in a bag of 10 or of 100.

AREAS OF APPLICATION:

The caustic sticks are used in the treatment of warts, removal of excess tissue (created in the healing process of wounds).

2. WHERE TO PAY ATTENTION TO BEFORE USING MAINIT Caustic sticks WITH SILVER NITRATE?

Caustic sticks must not be used if you are allergic to silver nitrate or potassium nitrate. It may take up to 24 hours for the treated area to become discolored.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- Any unusually discolored or unusually shaped skin changes that are not unambiguously identifiable as 'wild flesh' or as common warts, the MAINIT SILVERNITRATE Caustic Sticks should only be used under the supervision of a physician.
- Don't touch the tip (etchant) of the MAINIT SILVERNITRATE Caustic Sticks with your hands.
- Protect your clothing and other objects while using of the MAINIT SILVERNITRATE Caustic Sticks. Silver nitrate causes brown-black stains that cannot be removed with common cleaning or laundry detergents.
- Healthy skin that inadvertently comes into contact with the tip of the MAINIT SILVERNITRATE Caustic Stick should be carefully cleaned with running water and a sponge. Nevertheless, a harmless dark discoloration of these skin areas may occur. The dark discoloration will fade again after about 10-14 days.
- If the MAINIT SILVERNITRATE Caustic stick has come into contact with the eye immediately rinse under running water with the eyelid open for at least 5 minutes and then consult a physician.
- Do not use the caustic stick on sensitive areas of the body (such as eyes, genitals).
- When used around the mouth, be careful not to swallow any parts of the tip.
- Any serious event related to the medical device should be reported to the manufacturer, and the competent authorities of the Member State where the user is located.

CHILDREN: Use in children under 3 years of age should only be on the advice of a physician.

Pregnancy AND Lactation: If you are pregnant, nursing, suspect that you are pregnant or plan to become pregnant, you should consult your physician or pharmacist before using this medical device.

DRIVING SAFETY: The use of MAINIT SILVERNITRATE Caustic Stick does not affect the ability to drive.

3. HOW SHOULD MAINIT SILVER NITRATE Caustic sticks BE USED?

Always use this medical device exactly as described in the instructions for use. When in doubt, consult your physician or pharmacist.

HOW TO USE:


- For external use;
- Clean area to be treated;

See drawing below;

- Fig1. Put a drop of clean water on a non-absorbent, clean, firm surface, such as an upside-down glass on a table.
- Fig2. Place the tip of the Caustic stick in the drop of water, move the tip very gently (about 2 seconds) in the water.
- Fig3. The stick is ready for use.
- Fig4. **DO NOT** let the water or the tip of the stick come into contact with healthy skin, clothing, furniture or other surfaces. Protect healthy skin around area to be treated with a thin layer of petroleum jelly.
- Fig5. **Gently** dab with the tip of the Caustic stick on the area to be treated. Do **NOT** use pressure. If the tip breaks, make sure that all parts are removed with a paper towel.
- Fig6. Let the treated spot dry thoroughly, the spot will turn black within a short time, and be shed in the following days.

Repeat the treatment every 2-3 days until the desired result is achieved. Multiple treatments may be required. Do not use it for more than 14 days. If there is no improvement, consult a physician.

Use a paper towel to dry the tip of the stick and the remaining water.

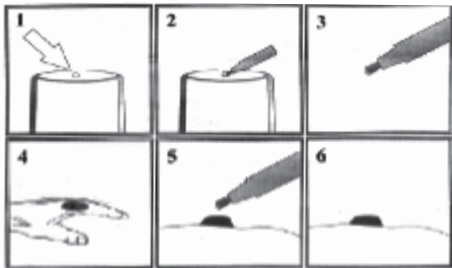

IN CASE OF OVERDOSE OF MAINIT SILVERNITRATE Caustic sticks:

Excessive use (without waiting for change) may cause irritation or inflammation around the treated area. In such cases, consult your physician before further use

4. WHAT SIDE EFFECTS MAY OCCUR?

There may be hypersensitivity reactions or local irritation of the skin such as itching, red discoloration, blisters or a slight burning sensation. If you notice any side effects, consult your physician or pharmacist. This also applies to side effects not listed in the directions for use.

5. HOW SHOULD MAINIT SILVER NITRATE Caustic sticks BE STORED?

- Store this medical device in the original packaging to protect the contents from light.
- Store the packaging in a dry place. Close the package carefully after open until the next use.
- Store this medical device out of the reach of children.
- You should not use this medical device after the expiration date.
- The expiration date is indicated on the back of the package.
- After use, the sticks can be disposed by way of regular household waste.

6. PACKAGE CONTENTS AND ADDITIONAL INFORMATION:

Available in packs of:

- Once 1 piece 40% caustic stick; Red stick packed in cardboard box; Mainit artnr 226504 (one person, multiple use)
- Once 1 piece 95% caustic stick; Blue stick packed in cardboard box; Mainit artnr 226511 (one person, multiple use)
- Once 100 pieces 75% caustic stick; Longer sticks packed in a bag of 100 in a plastic tube; Mainit artnr 226505 (single use)
- Once 100 pieces 95% caustic stick; Longer sticks packed in a bag of 100 in a plastic tube; Mainit artnr 226506 (single use)
- Once 10x10 pieces 75% caustic stick; Longer sticks packaged in 10 bags of 10 in a cardboard box; Mainit artnr 2265051 (single use)
- Once 10x10 pieces 95% caustic stick; Longer sticks packaged in 10 bags of 10 in a cardboard box; Mainit artnr 2265061 (single use)

More information can be found on our homepage www.mainit-bv.nl.

MANUFACTURER:

 Mainit-BV
Roode Wildemanweg 5
1521PZ Wormerveer
The Netherlands
info@mainit-bv.nl
www.mainit-bv.nl

VERSION OF THE IFU: 20 October 2025

Rev.03

